

## Nyttig hjelpemiddel i rehabilitering

**Norske kommuner har som mål at eldre skal bo så lenge som mulig hjemme og klare seg selv.**

Ergogrip støttebøyle er et godt hjelpemiddel til dette.



- 
- **Støttebøylene kan påmonteres eksisterendeservanter**
  - **Ved dokumentert behov kan helsepersonell i kommunen hjelpe med søknad til NAV om bøyle**
  - **Kan monteres av servicemann/tekniker i kommunen**
- 

### **Bruksområde for Ergogrip støttebøyle**

Ergogrip støttebøyle er en enkel bøyle til bruk i hjem, omsorgsboliger, sykehjem og sykehus. Bøylene forebygger fall og gir god støtte under pleie og stell.

Letter arbeidet for pleiere og pårørende.

### Typen støttebøylar:

Bøylene 1, 2 og 3 passer til de fleste veggfaste servanter med mål 560 x 420–440 mm. Type 4 passer til møbelservant IFØ sign. art. HMS nr. finnes i Hjelpemiddeldatabasen.

**Type 1**



**Type 2**



**Type 3**



**Type 4**



### Veggfester/montering for støttebøylar

**A**



**B**




**A** Har hel bakplate som festes i servantens opphengssystem og må monteres/demonteres av rørlegger. Anbefales i nybygg og ved totalrehabilitering.

**B** Har ny modell med teleskopisk justering for tilpassing av ulik avstand mellom vegg og servant. Bøylene monteres i spikerslag eller stendere uten demontering av vask. Kan monteres av vaktmester eller andre med teknisk innsikt.

**Type 4** kan enkelt monteres rett i festerørene til servanten.

### Måleark

For å finne ut hvilken bøyle som passer til din servant brukes et måleark. Kontakt oss og få tilsendt måleark.

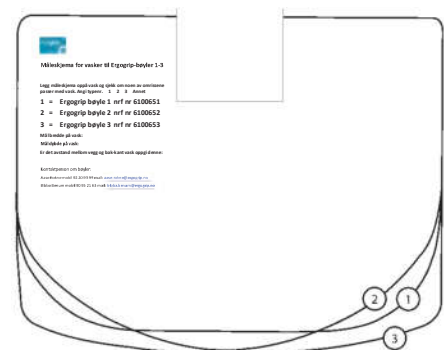

### Har du spørsmål vedrørende Ergogrip Støttebøylene?

Kontaktpersoner:

Aase.Rokne@ergogrip.no

Bibba.Benum@ergogrip.no